

TECHNISCHE KURZANLEITUNG

Programmupdate Congrav® OP-S



Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen um ein Programmupdate auf dem Congrav® OP-S durchzuführen

1. Schritt Verbindungskabel auf der Rückseite vom Congrav®OP-S entfernen, um das Gerät spannungsfrei zu schalten


2. Schritt An Unterseite Gerät Congrav®OP-S die Abdeckplatte öffnen



3. Schritt Micro SD-Karte durch leichten Druck entriegeln (Federmechanismus) und dann entnehmen



4. Schritt Micro SD-Karte mittels PC lesen => ADAPTER !!!

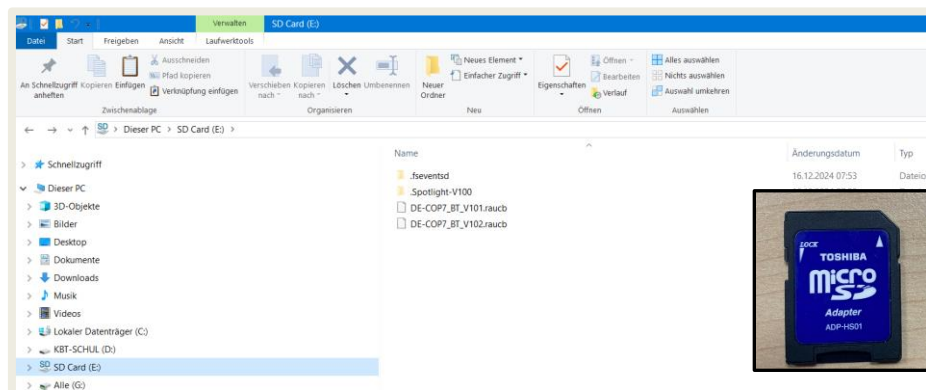

5. Schritt Neuen Programmstand mittels „Kopieren und Einfügen“ auf die Micro SD-Karte übertragen

- Gegebenenfalls alte Programmstände löschen.
- Achtung: Nicht mehr als 2 Programmstände möglich!

6. Schritt Micro SD-Karte vorsichtig wieder in das Gerät Congrav®OP-S einsetzen


7. Schritt Am Gerät Congrav®OP-S die Abdeckplatte wieder montieren um Gerätesicherheit /-schutz wieder herzustellen

8. Schritt Gerät Congrav®OP-S wieder anschließen und Bootroutine abwarten, das kann einen Moment dauern


9. Schritt Congrav®OP-S in die Service-Ebene „3“ bringen.
Geben Sie den Werkscode **08433** ein




10. Schritt „Burger Menü“ öffnen

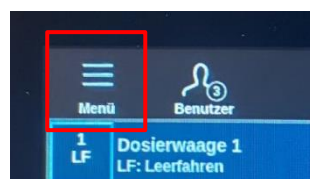

11. Schritt „Update“ aufrufen

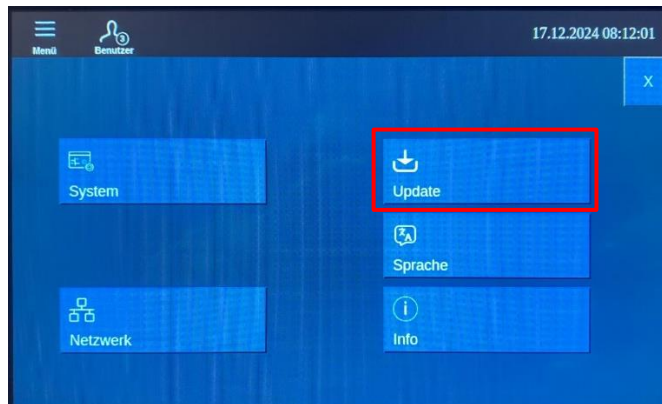

12. Schritt Neuen Programmstand anwählen und dann auf „Start Update“ drücken.

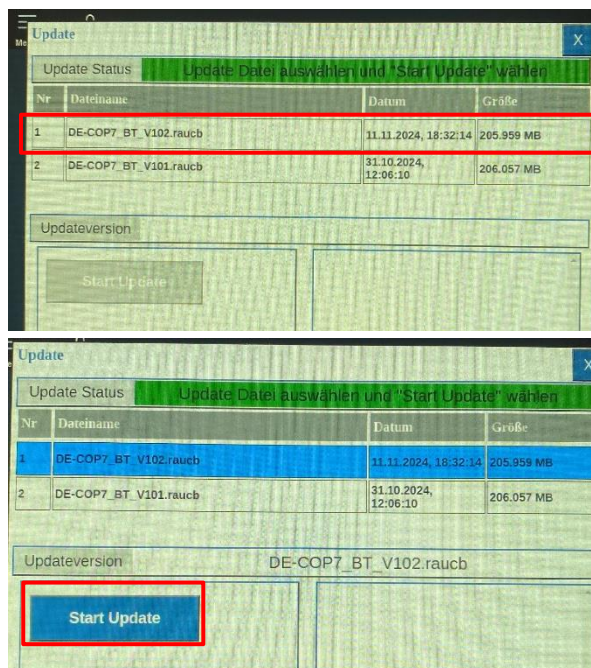

Congrav® OP-S lädt neues Programm und startet neu („Bildschirminformation beachten“!)